

⚠ 1. Veiligheidsinstructies

Lees voor gebruik de handleiding en de veiligheidsinstructies zorgvuldig door. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of lichamelijk letsel als gevolg van het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik en de omgang met het product.

1. Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter om dit product van stroom te voorzien.
2. Zorg ervoor dat alle kabels goed zijn aangesloten.
3. Gebruik dit product niet in de buurt van water/een hoge luchtvochtigheid.
4. Bij gebruik door kinderen is ouderlijk toezicht altijd voorgeschreven.
5. Als je last hebt van slechte oogcondities en/of lichtgevoeligheid bij gebruik van het product, stop dan met het gebruik en neem contact op met een dokter.
6. Niet geschikt om buiten te gebruiken.
7. Voorkom dat het product volledig in het zonlicht staat en/of in de buurt van hitte.
8. Gebruik het product niet als deze beschadigd is.
9. Maak het product nooit open.
10. Het product niet gebruiken bij gassen die vlam kunnen vatten.
11. Het product kan storingen veroorzaken aan radio's, mobiele telefoons en apparaten die draadloos werken. Als dit het geval is gebruik dan een ander stopcontact of verplaats het product.
12. Haal het product los van stroom als het onweert.
13. Voorkom het gebruik van het product in omgevingen met stof, vochtigheid, slechte ventilatie en plaatsen waar het trilt.
14. Het product niet gebruiken in combinatie met aanpassingen zoals: licht dimmers, timers, bewegingssensoren, spanningstransformatoren en verlengkabels.
15. Bewaar dit product op een schone, droge plek. Bewaar dit product niet op een locatie waar het aan extreem hoge of lage temperaturen wordt blootgesteld. Plaats geen andere voorwerpen bovenop dit product.
16. Maak het product nooit schoon terwijl het is verbonden met een stroombron. Gebruik een doek met weinig vocht om schoon te maken. Maak hierna direct het product droog. Niet verbinden met een stroombron als het product nog nat is.
17. Altijd uit de stroombron halen als het product niet gebruikt wordt.
18. Haal het product uit de stroombron als je niet aanwezig bent.
19. Laat geen kabels liggen waar over gestruikeld kan worden of per ongeluk aan getrokken kan worden.
20. Als het product beschadigd is of niet naar verwachting werkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met onze klantenservice.
21. Open het product nooit zelf. Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een gekwalificeerde monteur als het product niet naar behoren functioneert.
22. De lichtbron in dit product is niet vervangbaar.
23. Dit product is alleen geschikt voor persoonlijk gebruik. Als het gebruikt wordt als commercieel of professioneel product vervalt de garantie. De leverancier kan dan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade.
24. Het materiaal van de verpakking buiten het bereik van kinderen bewaren.

2. Test op overgevoeligheid vóór gebruik

Voer de onderstaande stappen altijd uit, vóór het gebruik, om er zeker van te zijn dat je niet overgevoelig bent voor licht.

Stap 1: plaats de lamp 50 cm van je af.

Stap 2: gebruik de lamp ongeveer 10 minuten en zet hem dan uit. Als de lamp heeft gezorgd voor enige vorm van ongemak, stop dan met het gebruik en neem contact op met een dokter. Als je geen ongemak hebt ervaren kun je de lamp dichterbij plaatsen en de gebruikersduur verlengen. Zorg ervoor dat de je lamp alleen gebruikt als jij dit als prettig ervaart.

3. Beoogd en aanbevolen gebruik

Ieder persoon ervaart het gebruik van deze daglichtlamp op een eigen manier. Ontdek daarom zelf welke combinaties van kleur, helderheid en tijdsduur jij als prettig ervaart. Het is aan te raden de lamp dagelijks rond hetzelfde tijdstip te gebruiken. Je hoeft de ingestelde tijd niet in één keer vol te maken, pauzes zijn prima. Voor een optimaal gebruik is regelmaat belangrijk. Merk je dat het gebruik minder prettig aanvoelt? Probeer dan de volgende keer een andere kleur of helderheidsinstelling. Pas het gebruik aan op wat jij fijn vindt.

Deze daglichtlamp is ontworpen om comfortabel omgevingslicht te bieden door daglicht te simuleren. Het product is niet bedoeld voor medische doeleinden en valt daarom buiten het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2017/745.

4. Start van gebruik

1. Verbind de adapter met de lamp via de achterkant van de lamp. Stop vervolgens de adapter in het stopcontact.
2. Druk op de aan/uit schakelaar aan de zijkant van de lamp.
3. Zet de lamp 20 cm tot 50 cm van je af, zorg ervoor dat je niet direct in de lamp kijkt.
4. Kies uit een van de kleuren.
5. Kies uit een van de helderheidsstanden
6. Stel de timer in voor 15, 30, 45 of 60 minuten. Het licht blijft aanstaan als je geen timer instelt.

5. Lichtkleur keuze

Deze daglichtlamp biedt verschillende lichtkleuren waaruit je kunt kiezen. Het is aan te raden om één kleur enkele dagen achter elkaar te gebruiken voordat je een andere probeert. Op die manier ontdek je welke lichtkleur het beste aansluit bij jouw persoonlijke voorkeur.



6. Technische specificaties

Model: DL-P

Afmeting: 250 x 180 x 18 mm

Gewicht: 650 g

Input: 110-240V ~ 50/60Hz

Output: 5.0V = 3.0A

Vermogen: 15W

Lichtbron: LED (Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse G)


Helderheid licht: 2000 lux – 12000 lux

Kleur licht: 1500K – 6500K

Timer: 15, 30, 45 of 60 minuten

Adapter model: SP050300-EU

7. Bedieningspaneel

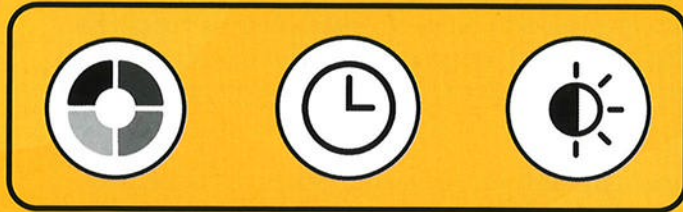

Kleur

Timer

Helderheid

8. Veelgestelde vragen

1. Moet ik direct in de lamp kijken?

Nee, het is niet noodzakelijk om recht in de lamp te kijken.

2. Wanneer staat de lamp op 12.000 lux?

Wanneer je gebruik maakt van deze daglichtlamp en op de knop van de helderheid klikt, kun je het aantal lux aanpassen. Wanneer je op de knop van de helderheid klikt en de lamp op de vierde stand staat (de felste stand), staat het op 12.000 lux.

3. Hoeveel afstand moet ik houden van de lamp?

Bij een afstand van ±15 cm tussen je gezicht en de lamp ervaar je 12.000 lux op de felste stand. Bij ±25 cm is dit 7.000 lux en bij ±35 cm is dit 3.500 lux.

9. Recyclen

Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

10. Disclaimer

Specificaties en/of ontwerp kunnen zonder kennisgeving en/of opgaaf van redenen worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT BRELLAVIO.

11. Garantie

Wij verlenen 2 jaar garantie op dit product. Als klant dien je een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. De garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij schade door eigen toedoen van de klant of door derden.

12. Klantenservice

Indien je een vraag hebt over het product, neem dan contact met ons op. Dit kan door een mail te sturen naar klantenservice@brellavio.nl. Vermeld hierbij altijd je bestelnummer, modelnaam en batchnummer.